



Pulsantiera HB80 Scheda tecnica

HB80

Oltre a garantire un semplice utilizzo grazie ai tasti con attivazione ottimizzata, HB80 presenta un design ergonomico e moderno. E' una pulsantiera sviluppata per il controllo di molteplici attrezzature MEDLINE® e CARELINE® quali: letti ospedalieri, sollevatori di pazienti, sedute specialistiche, lettini e poltrone di trattamento.

HB80 è disponibile nelle versioni da 10 e 12 tasti di attivazione.

Ulteriori caratteristiche:

- Protezione antimicrobica opzionale (struttura, gancio, frontalina) per limitare la diffusione di microbi.
- Gancio o magnete di fissaggio.
- Molteplici frontali standard con diversi simboli disponibili oppure frontali personalizzabili.
- Retro illuminazione opzionale di colore blu o verde solo in combinazione con centraline LINAK OpenBus™: per un utilizzo più agevole durante le ore notturne.
- Grado IPX6 Washable DURA™ opzionale per un'elevata resistenza ai liquidi.



Caratteristiche & Opzioni:

- Controllo fino a 6 attuatori
- Colore: grigio chiaro o grigio scuro
- Classe di protezione: IPX4, IPX6 Washable DURA™
- Numero di tasti: fino a 10 o 12
- Frontalina: standard o personalizzabile
- HB80 con opzione antimicrobica: sì come opzione
- Cavo: spiralato o dritto
- Tipologia tasti: interruttori tattili
- Opzioni di memoria
- Retro illuminazione: blu o verde (solo con centraline OpenBus™)
- Gancio o magnete di fissaggio



Utilizzo:

- Temperatura d'esercizio: da 5° C a 40° C
- Temperatura di stoccaggio: da -10° C a +50° C
- Compatibilità con la maggior parte di centraline di controllo LINAK. Per maggiori dettagli contattare LINAK
- Approvazioni: IEC60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 e CAN/CSA-22.2 No 60601-1.

La versione HB86 ha una distanza ridotta tra i tasti e non può essere certificata secondo normativa EN IEC60601-2-52 Application Environment 4 per letti di cura domestici (o EN1970). HB80 è sviluppata e testata con grado di protezione IPX6 lavabile e conforme con normativa EN60601-2-52 cl. 201.11.6.6.101 (Machine washable medical beds).

La versione con protezione antimicrobica di HB80 include additivi attivi nella plastica della pulsantiera e nel gancio. La frontalina presenta un secondo strato antimicrobico.

**Dimensioni (mm):
HB81 - HB85**

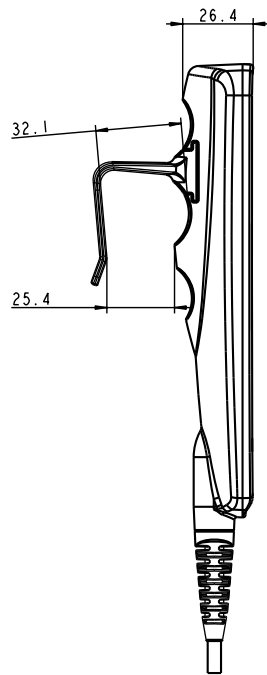
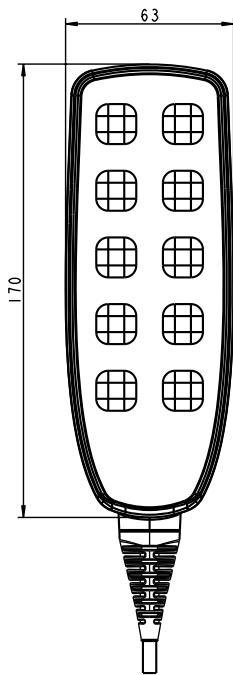


Gancio



Magnete

**Dimensioni (mm):
HB86**

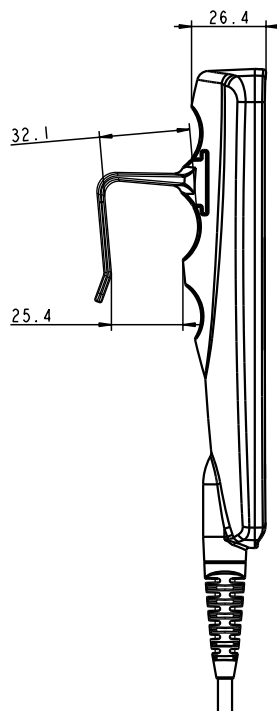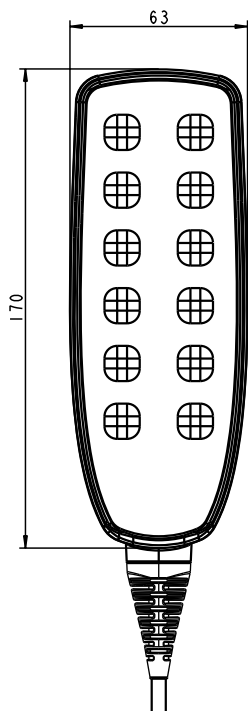

Gancio



Magnete

HB80

Esempio d'ordine:

<p>HB8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 2 M 0 0 0 0 0 1 A 0 S 0 0 0</p>	<p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Cavo S = Diritto C = Spiralato R = Diritto e spiralato X = Speciale N = Nessuno</p> <p>Materiale cavo N = Nessuno 0 = PVC 1 = PU X = Speciale</p> <p>Connettore N = Nessuno A = DIN (CB8/CB10...) B = Mini-fit (CS27) C = Modulare 8 PIN (CB7) D = Modulare 10 PIN (CB6/CBJH/COxx/CAXx/COLxx/CALxx) X = Speciale</p> <p>Colore cavo 0 = Non definito 1 = Nero, RAL 9005 2 = Grigio RAL 7035 3 = Grigio scuro RAL 7016 X = Speciale</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Struttura 0 = Standard 1 = Antimicrobica*</p> <p>Montaggio 0 = Con gancio M = Con magneti (no per versione antimicrobica)</p> <p>Coloure 1 = Nero RAL 9005 (non disponibili per nuovi progetti) 2 = Grigio RAL 7035 3 = Grigio scuro RAL 7016 X = Speciale</p> <p>Grado IP 0 = IPx0 5 = IPx5 1 = IPx1 6 = IPx6 4 = IPx4 7 = IPx7 W = IPx6 Washable</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Non utilizzato 0 = Nessuno</p> <p>Retro-illuminazione 0 = Nessuna 1 = Verde (solo con OpenBus) NO per centraline CBJC 2 = Blu (solo con OpenBus) NO per centraline CBJC</p> <p>Codice frontalina xxx = Le ultime 3 cifre riportate sulla frontalina</p> <p>Frontalina 0 = Standard X = Speciale (frontaline antimicrobiche sono sempre speci</p> <p>Funzionalità 0x = Analogico Comune Standard Hx = Analogico Comune GND Vx = OpenBus™ xx = Speciale</p> <p>Numero file 1 = 1 fila 2 = 2 file 3 = 3 file 4 = 4 file 5 = 5 file 6 = 6 file</p> <p>Comando HB8X</p>
--	---

*Ral 7035, gancio, etichetta prodotto sul cavo


Frontaline standard HB8x (trasparenti e solo con retro-illuminazione)*:




00HB821D-020




00HB831D-021

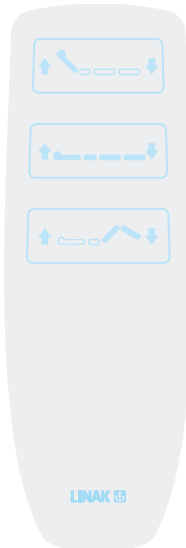


00HB831D-022

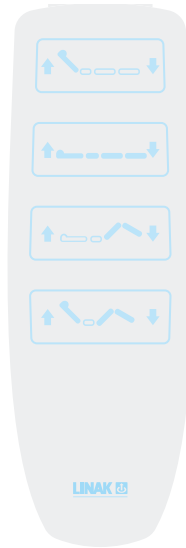


00HB841D-001
prev. 00HB841A-001

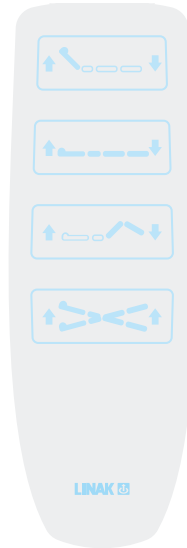


00HB841D-002
prev. 00HB841A-002

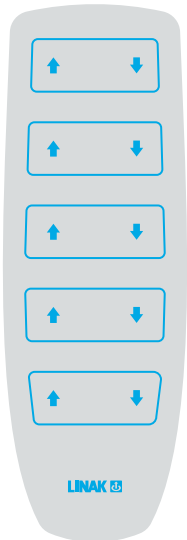

00HB851D-002

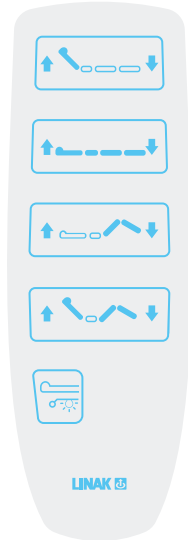

00HB851D-003

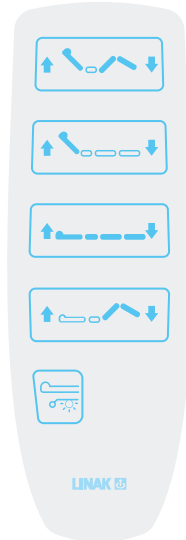


00HB851D-004



00HB851D-007
prev. 00HB851A002




00HB851D-011

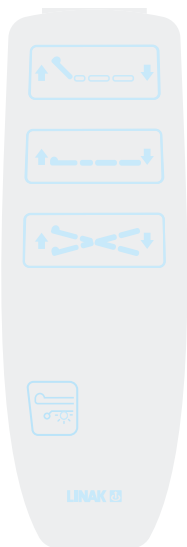

00HB851D-019




00HB851D-021

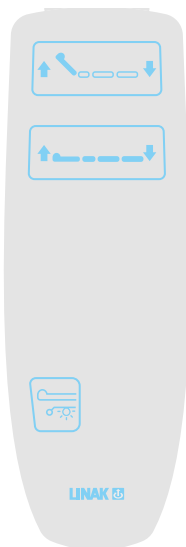

00HB851D-022




00HB851D-035

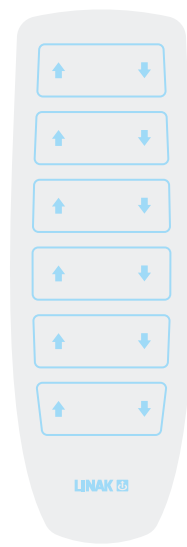


00HB861B-001
prev. 00HB861B001

* * Se si desidera una frontalina trasparente senza retro-illuminazione è necessario creare un articolo speciale.


Frontaline standard HB8x (trasparenti e solo con retro-illuminazione)*:

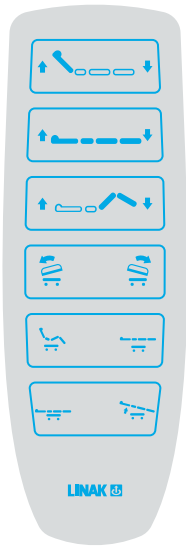


00HB861B-002
prev. 00HB861B002

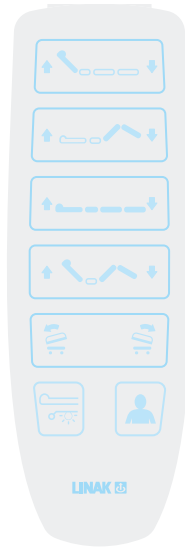

00HB861B-005

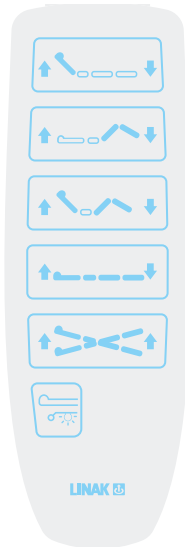


00HB861B-007

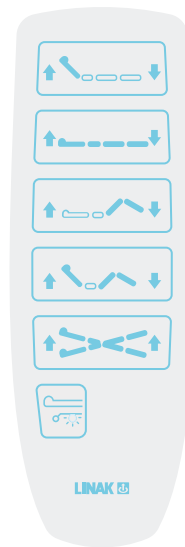


00HB861B-009

Frontaline standard HB8x (non trasparenti, non con retro-illuminazione)*:

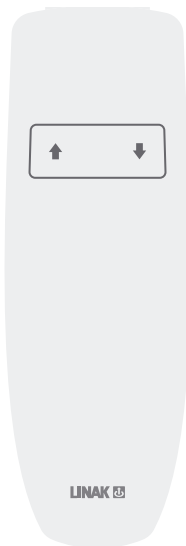


00HB811A-001

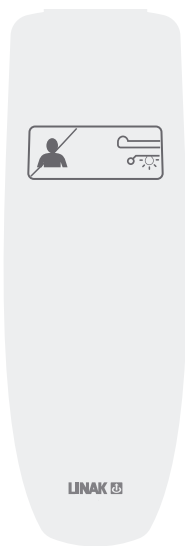

00HB811A-004




00HB811A-033

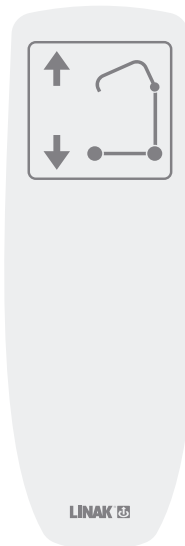


00HB821A-001



00HB821A-002

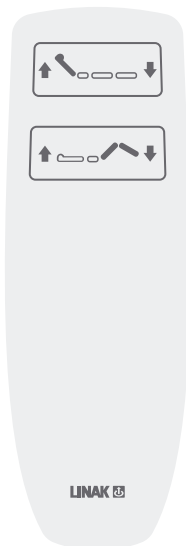


00HB821A-008

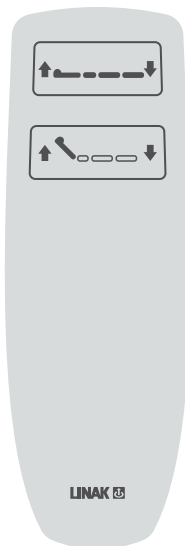


00HB821A-041



00HB831A-001

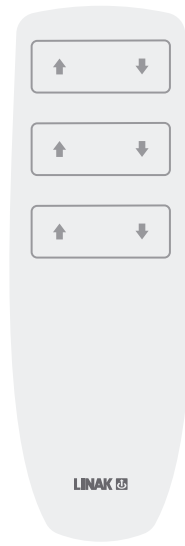

00HB831A-002

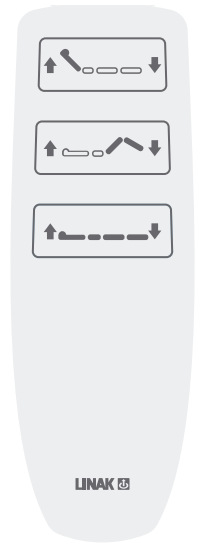

00HB831A-009

* Se si desidera una frontalina non trasparente con retro-illuminazione è necessario creare un articolo speciale.


Frontline standard HB8x (non trasparente, non con retro-illuminazione)*:




00HB831A-011




00HB831A-029
Per OpenBus V0 per COL50

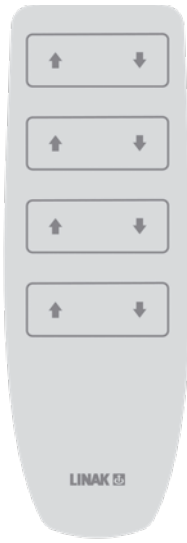

00HB841A-003

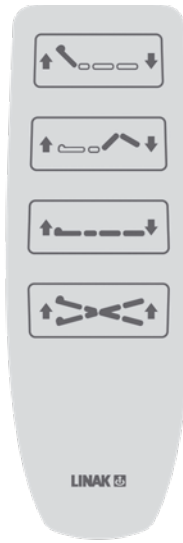


00HB841A-006

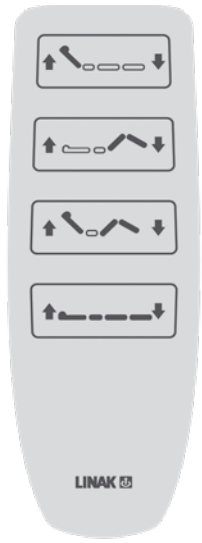


00HB841A-008



00HB841A-032

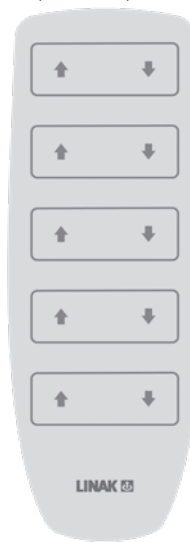

00HB851A-005

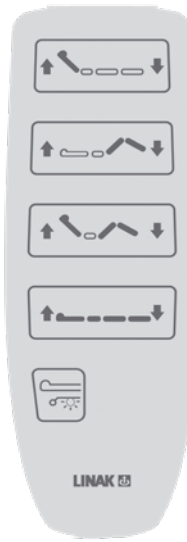


00HB851A-012



00HB851A-013



00HB851A-020

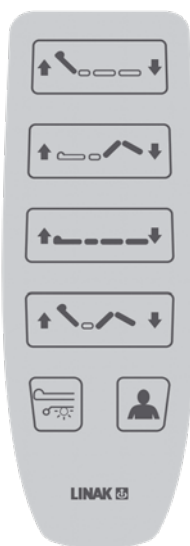


00HB851A-037




00HB851A-056



00HB851A-057

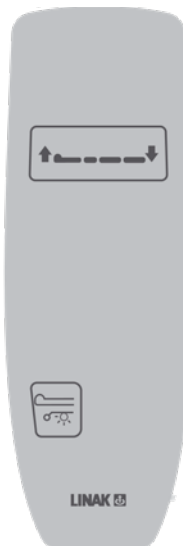


00HB851A-072

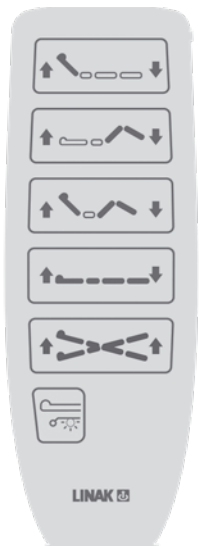

00HB861E-008

* Se si desidera una frontalina non trasparente con retro-illuminazione è necessario creare un articolo speciale.

Frontline standard HB8x (non trasparenti, non con retro-illuminazione):

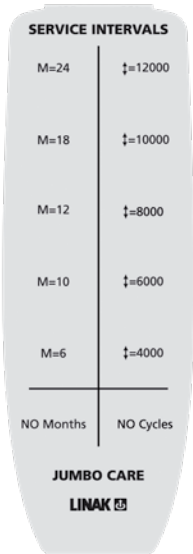

00HB861E-010
V2 pulsantiera per
CBJC



00HB861E-076



00HB861E-080

Esempio di frontalina antimicrobica HB8x



00HB851N-002

Frontline standard HB80 - verificare che le funzionalità della pulsantiera corrispondano ai simboli riportati sulla frontalina.



Verificare che i canali mostrati corrispondano ai canali della centralina di controllo.



Per frontaline personalizzate contattare LINAK.

LINAK® non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori all'interno di cataloghi, brochure o altro materiale e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. LINAK non può garantire la disponibilità dei propri prodotti e si riserva il diritto di interrompere la vendita in qualsiasi momento. E' responsabilità dell'utente verificare la compatibilità dei prodotti LINAK per una specifica applicazione. Tutte le vendite sono soggette ai "Termini e condizioni di vendita e fornitura LINAK ITALIA" disponibili sui siti web LINAK.

Il nome e logo LINAK sono marchi registrati e di proprietà di LINAK A/S. Tutti i diritti sono riservati.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it